

产品使用说明书

一、产品名称：一次性使用精密过滤输液器

二、型号规格：-----

三、企业名称：山东威高集团医用高分子制品股份有限公司

四、注册地址：山东省威海市世昌大道 312 号

五、生产地址：山东省威海市世昌大道 312 号

六、联系方式：电话：0631-5620486 5620619 传真：0631-5660659

七、售后服务机构：

山东威高集团医用高分子制品股份有限公司市场部

电话：0631-5620486 5620619


八、生产企业许可证号：鲁食药监械生产许 20060166 号（补）

九、注册证号：国食药监械(准)字 2004 第 3660055 号（更）

十、产品标准号：GB18458.1《专用输液器 第 1 部分 一次性使用精密过滤输液器》

十一、产品结构、性能

1、结构：一次性使用精密过滤输液器产品由瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、液体通道、滴管、滴斗、药液过滤器、软管、流量调节器、注射件、外圆锥接头和外圆锥接头保护套组成，外圆锥接头可配一次性使用静脉输液针或一次性使用注射针，连成一个完整的密闭系统，用于人体静脉输注药液使用。

2、性能：我公司的  牌一次性使用精密过滤输液器的终端过滤器过滤膜体孔径小于等于5.0微米，可有效截留大于患者微循环血管内径的不溶性微粒，避免了临床微粒引发的各种不良反应，如静脉炎等。

主要性能指标如下：

- （1）产品无菌，无菌有效期两年；
- （2）产品无热原；
- （3）产品无异常毒性；
- （4）产品无溶血反应；
- （5）有效截留大于患者微循环血管内径的不溶性微粒，滤除率大于 90%；
- （6）其它技术指标符合 GB 18458.1-2001。

十二、适用范围：

该产品主要用于临床静脉输液。

十三、禁忌症：

- 1、禁止操作者的手或未消毒物品碰及接触药液和静脉输液针；
- 2、禁止垂直排气,避免输液器内残留气体在滴斗上部形成正压,产生输液气泡。
- 3、禁止输液结束时，药液低于滴斗液面 2/3，防止空气进入患者静脉血管形成气栓；
- 4、本产品禁止用于输注血液和血制品。


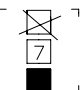

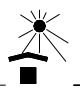
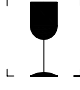
十四、注意事项、警示及提示性说明：

- 1、一次性使用，用后销毁；
- 2、打开包装，立即使用；
- 3、已灭菌，包装破损，保护套脱落，禁止使用；
- 4、包装内发现异物，禁止使用；
- 5、药液注射件用于操作时加药用，使用前需消毒处理；

6、静脉针规格见小包装；

7、只能重力输液。

十五、标签、包装标识样图：

- 1、 表示一次性使用，说明产品不能再次使用。
- 2、 表示层数极限，说明产品摆放不能超过 7 层。
- 3、 表示保持干燥。
- 4、 表示避免日晒。
- 5、 表示易碎物品，说明要小心轻放。
- 6、

STERILE	EO
---------	----

 表示经环氧乙烷灭菌的产品；

十六、安装说明：不适用。

十七、使用说明：

- 1、开启密封包装袋取用；
- 2、将瓶塞穿刺针及排气针插入输液瓶(袋)，
- 3、关闭调节器，将滴斗向上倾斜 30° 左右，手捏滴斗 2、3 次；打开调节器，同时倒置药液过滤器，使液体慢慢充满壳体。
- 4、排净气泡后，进行静脉穿刺；
- 5、根据需要调节流量；
- 6、待药液还有少量时，拔出静脉输液针，输液结束。

十八、维护保养方法：不适用。

十九、储存条件、方法：

本产品应储存在相对湿度不大于 80%，无腐蚀性气体，阴凉干燥、通风良好、清洁、远离含氯类消毒物品的环境中，本产品在运输过程中要谨防重压，阳光直晒和雪雨浸淋。

二十、有效期限：本产品有效期为两年。

二十一、其他内容：无